


NISKOTEMPERATUROWE CYRKULACYJNE ŁAŻNIE WODNE MAXIRCU™ CL (-35°C DO +150°C)



INNE ZDJĘCIA

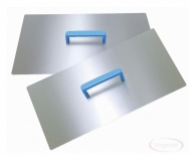

OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- sterownik Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętle i przyciskiem,
- funkcja podświetlenia wyświetlacza,
- Advanced Refrigerating System - zaawansowany system chłodzenia zapewnia odporność na temperaturę,
- innowacyjna mocna pompa cyrkulacyjna zapewnia jednorodność temperatury,
- innowacyjny system chłodzenia, wolny od CFC (R-404A),
- interfejs RS232C do zdalnego monitorowania i sterowania za pomocą PC,
- szybkie schładzanie,
- izolacja: pianka uretanowa,
- wskaźnik właściwego poziomu cieczy w łaźni,
- stal nierdzewna zapewnia trwałość urządzenia oraz stabilność temperatury,
- funkcja kompensacji do kontroli różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą uzyskaną,
- ostrzeżenie i funkcja Auto-Stop w przypadku niskiego poziomu cieczy,
- bezpieczny i energooszczędny system chłodzenia,
- w temperaturze poniżej 0°C zaleca się stosowanie alkoholu etylowego (94-95%).

MODELE

- **MaXircu CL-8**, 8 litrów; nr kat.: DH.WCL00408
- **MaXircu CL-12**, 12 litrów; nr kat.: DH.WCL00412

- **MaXircu CL-22**, 22 litry; nr kat.: DH.WCL00422
- **MaXircu CL-30**, 30 litrów; nr kat.: DH.WCL00430

SPECYFIKACJA

MODEL	MaXircu™ CL-8	MaXircu™ CL-12	MaXircu™ CL-22	MaXircu™ CL-30
Pojemność	8 L	12 L	22 L	30 L
Pompa	Max. przepływ: 25 L/min. (1~5 poziomów), Max. ciśnienie: 7,5 psi, max. lift: 4 m			
Zakres temperatury	-35°C ~ +150°C			
Dokładność	±0,1°C			
Rozkład temperatury	0,1°C - Display 0,5°C - Control			
Jednorodność i czujnik temperatury	±0,2°C (w -20°C), PT100			
Moc grzewcza	1,0 kW	1,5 kW	2 kW	2,2 kW
Chłodzenie	1/2 HP	1/2 HP	7/8 HP	1 HP
Chłodzenie w +20°C	500 W	530 W	860 W	1030 W
Chłodzenie w 0°C	340 W	370 W	620 W	760 W
Chłodzenie w -20°C	200 W	210 W	400 W	500 W
Czynnik chłodzenia	CFC-Free (R-404A) układ chłodniczy			
Całkowity pobór mocy	1,7 kW	2,2 kW	3 kW	3,3 kW
Timer	99 godz. 59 min. (nastawny / tryb pracy ciągłej)			
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z funkcją podświetlania			
Zewnętrzne dysze	i.d.10×o.d.12 mm (i.d. 10 / o.d.18 mm rurka silikonowa podłączona do wewnętrznego obiegu			
Sterownik	Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętką i przyciskiem			
Materiał wykonania	Wnętrze: stal nierdzewna Obudowa: stal malowana proszkowo Izolacja: pianka uretanowa (grubość 40 mm)			
Pokrywa	W standardzie dołączona pokrywa płaska Opcjonalnie: pokrywa dwuspadowa			
Zawór spustowy	Zawór kulowy (obrotowy)			
Powierzchnia robocza (W x D x H) [mm]	175 x 153 x 150	230 x 181 x 150	290 x 220 x 200	330 x 290 x 200
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	175 x 320 x 150	230 x 350 x 150	290 x 390 x 200	330 x 460 x 200
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	330 x 474 x 752	400 x 523 x 807	483 x 563 x 850	494 x 633 x 906

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl